










Liste der verwendeten Symbole



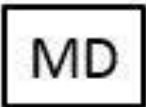

Stand: 08/2019

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	3082	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.
	Aus ISO 15223-1	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	Zeigt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	2497	Herstellungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
	2607	Verwendbar bis	Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	2492	Chargencode	Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	2493	Artikelnummer	Zeigt die Bestellnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	-	Medical Device	Zeigt an, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt.
	2501	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Ethylenoxid sterilisiert wurde.

DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	2503	Sterilisiert durch Dampf oder trockene Wärme	Zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Dampf oder trockener Wärme sterilisiert wurde.
	2609	Unsteril	Zeigt ein Medizinprodukt, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde.
	2606	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht verwendet werden sollte, falls die Verpackung beschädigt oder geöffnet sein sollte.
	0624	Von Sonnenlicht fernhalten	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das Schutz vor Lichtquellen benötigt.
	0626	Trocken aufbewahren	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss.
	0632	Temperaturbegrenzung	Der obere und untere Temperaturgrenzwert muss neben der oberen und unteren waagerechten Linie angegeben werden.
	1051	Nicht wiederverwenden	Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.
	1641	Gebrauchsanweisung beachten	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.

DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	Abgeleitet von 2725	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Zeigt die Anwesenheit von Naturkautschuk oder trockenem Naturkautschuklatex als einen Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.
	Aus prEN 15986	Enthält oder Anwesenheit von Phthalate	Zeigt die Anwesenheit von einem oder mehreren Phthalaten als einen Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.
	Aus Richtlinie 93/42/EWG	CE-Kennzeichnung	Gibt an, dass das Produkt den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht; xxxx gibt die Kennnummer der zuständigen Benannten Stelle an.
	0434A	Achtung	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.